



Manuale per la gestione delle protesi acustiche

BTE Ricaricabili

**Gentile Cliente,
Congratulazioni per il tuo nuovo acquisto!**

Questo breve libretto d'uso e manutenzione ti aiuterà a mantenere i tuoi apparecchi efficienti, per un'esperienza acustica sempre ottimale e più duratura nel tempo.


Per qualunque dubbio telefona al
Numero Verde gratuito

800 034 527

oppure vieni a trovarci in uno dei nostri centri di

Biella - Castellamonte - Vercelli

Manuale per la gestione delle protesi acustiche

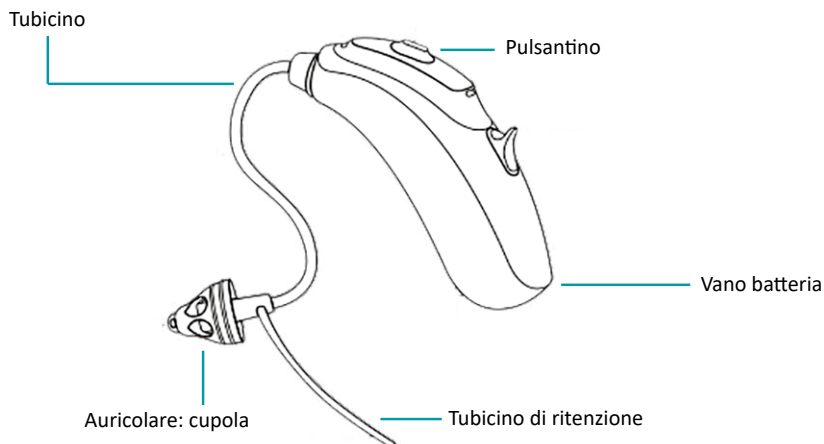

Come distinguere apparecchio destro e sinistro

Per distinguere l'apparecchio destro da quello sinistro bisogna guardare il colore del contrassegno:

- il contrassegno **BLU** indica l'apparecchio **SINISTRO**
- il contrassegno **ROSSO** indica l'apparecchio **DESTRO**

N.B.: anche i tubicini sono dotati di contrassegni **ROSSO** e **BLU**


SI CONSIGLIA DI FISSARE UN APPUNTAMENTO PER LA
REVISIONE PERIODICA DEI VOSTRI APPARECCHI
OGNI 4 MESI (CAMBIO TUBICINI E PULIZIA).

Operazioni di pulizia apparecchi

Svitare il tubicino dall'apparecchio (è consigliabile effettuare tale operazione prima su un apparecchio e poi sull'altro per evitare di confondere l'apparecchio destro con il sinistro).



Ispezionare il tubicino, verificando che non siano presenti goccioline di acqua (sudore, condensa, umidità). Per rimuoverle usare una pompetta ad aria.

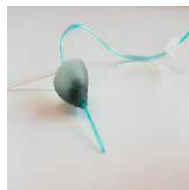

Far passare il filetto verde per tutta la lunghezza del tubicino partendo dal punto in cui si aggancia all'apparecchio fino a farlo uscire dalla cupolina (fare attenzione di spostare bene l'anellino paracerume sulla punta della cupolina).



Sempre con il filetto verde togliere eventuali residui dall'anellino in cima alla cupolina.

Riavvitare il tubicino sull'apparecchio (occorrono due rotazioni complete). Fermarsi quando la parte lunga del tubicino risulta parallela all'apparecchio.




SI CONSIGLIA DI EFFETTUARE QUESTE OPERAZIONI DI PULIZIA ALMENO UNA VOLTA ALLA SETTIMANA, ANCHE SE LE PROTESI FUNZIONANO CORRETTAMENTE.

Messa in carica delle protesi

Collegare il caricatore alla corrente e assicurarsi che il led posto nella parte posteriore vicino allo spinotto sia illuminato di **VERDE**.

Inserire gli apparecchi nei vani di carica rispettando gli indicatori **DX** e **SX** presenti sul caricatore.

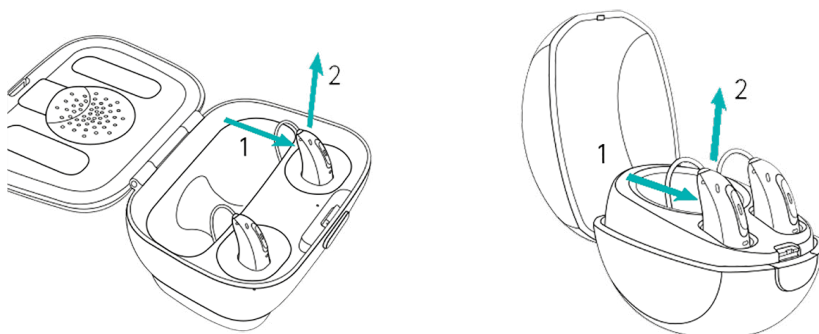

Tempi di ricarica

Indicatore Led	Stato della carica	Tempi di carica
● ● ●	0-10%	30 min (30%)
● ● ●	11-80%	60 min (50%)
● ● ●	81-99%	90 min (80%)
■	100%	3 ore

Il processo di carica si interromperà automaticamente quando le batterie saranno completamente cariche, quindi gli apparecchi possono essere lasciati nel caricatore in sicurezza.

Gli apparecchi si spengono automaticamente quando messi in carica e si accendono una volta rimossi dal caricatore.

ATTENZIONE: non scollegare la presa di corrente quando gli apparecchi sono inseriti nel caricatore altrimenti, accendendosi, perderanno la carica.

Cosa fare se gli apparecchi non emettono nessun suono

- 1. L'apparecchio, chiuso in una mano, emette suono (fischia) ma non amplifica:** eseguire una completa operazione di pulizia del tubetto. Qualora continuasse a non funzionare rivolgersi all'audioprotesista.
- 2. L'apparecchio, chiuso in mano, NON emette alcun suono (non fischia):** rivolgersi subito all'audioprotesista per capire il difetto dello strumento.
- 3. L'apparecchio non emette nessun suono, non si carica e non si accende nessun LED, potrebbe essere in blocco:** tenere premuto il tasto inferiore per 20 SECONDI. Rimetterlo nel caricatore e attendere qualche secondo fino alla comparsa delle luci. Se dopo questa procedura il problema persiste, rivolgersi all'audioprotesista.

Raccomandazioni

Non indossare le protesi dal parrucchiere o mentre ci si pettina i capelli.

Se si utilizza la lacca per capelli, togliere le protesi al momento dell'uso.

Fare in modo di non bagnare le protesi.

Non utilizzare detergenti quali detersivi, alcool e solventi, potrebbero danneggiare le protesi.

Prodotti per la pulizia

FARSI SEMPRE CONSIGLIARE DAL CENTRO ACUSTICO DI
FIDUCIA I PRODOTTI PIU' ADATTI ALLE PROPRIE PROTESI
E COME UTILIZZARLI NEL MODO CORRETTO.

Acustica Biellese
Un team sempre al tuo fianco...





Acustica Biellese S.r.l.
Biella | Castellamonte | Vercelli
Numero verde gratuito **800 034 527**
info@acusticabiellese.com
www.acusticabiellese.com